


Боргачёва Ж.

**КОРРЕКТОР
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ**

КФС

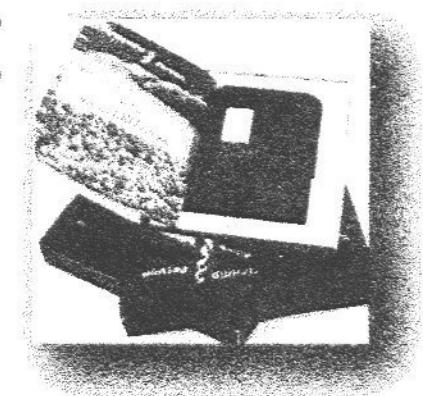

**РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРИМЕНЕНИЮ**

(информация для пользователя)

Боргачёва Ж.

**КОРРЕКТОР
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ**

(КФС)

**РЕКОМЕНДАЦИИ
К ПРИМЕНЕНИЮ**
(информация для пользователя)

В организме любого живого существа, в т.ч. в организме человека постоянно идет процесс подстраивания под внешние воздействия окружающей среды, т.е. адаптации к внешним ритмам экосистемы (например, изменения температуры, влажности, атмосферного давления, смена дня и ночи и т.д.). Это связано с фундаментальными жизненными процессами окисления-восстановления и поддержания кислотно-щелочного баланса.

Само понятие здоровья означает слаженную работу всех органов и систем, гармонию с окружающей средой. Но сейчас гармонии достичь очень сложно, мы отошли от Природы и очень активно переделываем нашу Землю под свои нужды. В результате произошло резкое снижение качества питьевой воды; значительно ухудшилась экология, что повлекло за собой изменение состава растительной и животной пищи; на нас постоянно действует электромагнитный техногенный смог; да и сами люди озлобились, так называемые соционатогенные влияния наносят не меньший вред на тонком и физическом уровне; при этом мы сейчас живем в период резко меняющихся частотных характеристик магнитного поля Земли.[1]

Для восстановления утраченной гармонии требуются нечто, что сможет компенсировать агрессивные внешние возмущения для организма, чтобы сохранить его целостность и возможность полноценного функционирования. КФС – это самый эффективный, наиболее многофункциональный и надежный прибор, созданный руками наших ученых.

Поздравляем вас! Вы являетесь счастливым обладателем уникального устройства, инновационной разработки группы российских ученых под руководством С.В. Кольцова – корректора функционального состояния (КФС).

Чтобы помочь Вам наиболее эффективно использовать устройство КФС, мы предлагаем вам изучить рекомендации по применению, основанные на результатах опыта пользователей и медицинских исследований, изложенных на научно-медицинских конференциях, которые были посвящены КФС.

Основные направления применения прибора КФС:

- изменение структуры воды или любых водных сред;
- коррекция функционального состояния любого биологического объекта (человек, животное, растение);
- защита от различных электромагнитных, геопатогенных, соционатогенных излучений.

Обращаем ваше внимание, что **оздоравливающее действие на организм происходит через воду или любую другую водную среду, обработанную на КФС**. В результате чего вода становится исцеляющей, физиологичной нашему организму. Употребление такой структурированной воды освобождает организм от довольно значительных энергозатрат, это благотворно сказывается на общем состоянии человека, происходит увеличение периода активной жизнедеятельности и продолжительности жизни, нормализуется обмен веществ, активизируется функциональная деятельность нервной, кровеносной, эндокринной и пр. систем, восстанавливаются угасшие функции органов.

Обратите внимание при использовании КФС:

- Во избежание порчи защитного корпуса КФС и в целях увеличения срока использования прибора не рекомендуется подвергать прибор резкой смене температуры и резким ударам. Также не рекомендуется мочить и опускать прибор в воду. Если же это произошло однократно, ничего страшного - КФС будет нормально работать, пока не расклейтся внутренняя конструкция.
- Для удобства (чтобы не соскользнул) посуду с жидкостью для структуризации ставить на ребристую поверхность пластины
- Не рекомендуется постоянно носить КФС в области сердца (особенно людям с кардиостимулятором)
- При изготовлении КФС используются материалы самой слабой намагниченности, токсические материалы не применяются. Прибор безопасен и прост в использовании. Возрастных ограничений для применения нет, детям не рекомендуем КФС №3 и №4 до полового созревания. Приборы КФС приобретаются один раз на всю жизнь, и пользоваться ими может вся семья. Аналогов данному устройству не существует.
- КФС может работать через металл, дерево, пластик, полиэтилен, керамику, стекло, ткань и т.д.
- Пластины прочны, износостойчивы и прослужат Вам много лет при правильном использовании.
- На КФС больше ничего записать нельзя, но нельзя и стереть уже записанную информацию, поэтому ею можно пользоваться даже после самых тяжелобольных людей. Также вы можете приборами КФС проводить восстановительные сеансы для тех, кто не в состоянии их приобрести (делать прокачку, заряжать людям воду, мази, крема и т. д.). КФС перестанет работать только при физическом разрушении самой пластины – золотистая пластина КФС помещена в синий защитный пластиковый корпус. Надпись на корпус пластины нанесена типографской краской. Производитель гарантирует 2 года срока эксплуатации, в реальности пластины можно пользоваться десятилетиями (ни одна с 1999-2000 г.г. не вышла из строя).
- КФС желательно не заносить в кабинеты рентгена, не клать на приборы измерительной аппаратуры во избежание порчи аппаратуры.
- Не применять КФС во время полостных операций, так как наркоз перестает действовать, поэтому только сразу после операции - для улучшения заживления.

1. Структурирование воды (любых водных сред)

Что можно структурировать?

-На КФС рекомендуется структурировать воду, любые водные растворы, в том числе различные чаи, кофе, соки, компоты, отвары, квасы, морсы, молоко и молочнокислые напитки, любые домашние или магазинные напитки, жидкости, консервации, маринады, соусы, алкоголь и т.д. Так же рекомендуется подвергать обработке любую принимающую пищу (не только жидкую, но и твердую, но не сухую полностью обезвоженную). Отметим, что не имеет смысла пытаться структурировать целые фрукты или овощи – в них своя структура, созданная самим растением. Однако сок из них или салат из порезанных овощей (фруктов) структурировать можно.

Имейте в виду, что при кипячении часть информации теряется, поэтому лучше заряжать уже готовый продукт. Заряженная вода способна держать информацию месяцами. При длительном хранении необходимо заряженную на КФС воду периодически «встряхивать».

Во время приема пищи использовать КФС как подставку под посуду, в которой находится принимаемая еда и различные жидкости. Время структуризации 2-3 минуты. Посуда устанавливается на рабочую поверхность. При этом обработанные прибором КФС продукты питания приобретают полезные для организма качества, обеззараживаются и продлевается их срок хранения (особенно молочные и кисломолочные продукты).

-При любых болях, воспалительных процессах, при ранах, ожогах и т.д. прикладывать КФС локально к прямой проекции жалобы (кроме области сердца). В остальное время можно носить КФС при себе, периодически перекладывая с места на место. *При этом местное воздействие на организм происходит за счет способности водной среды организма (кровь, лимфа, межклеточная жидкость, ликвор и т.д.) подстраиваться под среду, которую создает КФС (структурение водной среды).*

-Также рекомендуется обработать все косметические и моющие средства (не порошки): кремы, мази, гели, шампуни, пилинги, молочко, лосьоны, пенки, маски, в том числе детскую косметику, лекарственные мази, парфюмерию, средства для животных, средства по уходу за домом и садом (огородом), за автомобилем и т.д.

Предварительно сняв крышки и колпачки, установить флакон, тубу или баночку со средством на рабочую поверхность КФС на 5-10 минут, при этом достаточно одного раза примерно на месяц использования средства.

Если для дальнейшего использования какого-либо средства необходимо его разведение в воде, то можно также структурировать уже готовый водный раствор или воду для приготовления водного раствора из этого средства (например, средство для мытья полов).

-Автолюбители могут обрабатывать с помощью КФС бензин, моторное масло. Экономия бензина в зависимости от марки и степени изношенности машины составляет 5-15%, иногда достигает 20%.

При заправке автомобиля топливом к пистолету прикладывать КФС (лучше в полиэтиленовом мешочке, чтобы он не пропитался запахом).

Методы применения КФС для структурирования жидкостей

1. Вода в потоке - 0 мин (мгновенно).
2. При наливании в сосуд - 0-1/2 мин.
3. Спокойная вода (стоячая, не в потоке) - 2-3 мин.
4. Для больших объемов стоячей воды - 10-15 мин + встряска.

1. Поток

Быстрее всего вода или любая жидкость структурируется, если ставить КФС на движущийся поток. Время структуризации - мгновенно. Причем чем быстрее поток и чем более он турбулентный, тем быстрее структурируется вода от КФС. Например: кладите прибор на смеситель крана или

на водопроводные трубы (не под воду и не в воду!), принимая душ или набирая ванну; на шланг при поливе огорода или сада; на пистолет при заправке бензином автомобиля; для поляризации потока - на газовую трубу или электрический кабель и т.д.

2. При наливании в сосуд

Поставьте пустую посуду на прибор КФС, и наливайте в нее жидкость, можно помешать ложкой. Время структуризации - мгновенно, для уверенности можете подождать полминуты.

3. Спокойная вода (стоячая, уже налитая, не в потоке)

Использовать КФС как подставку под посуду, в которой находится вода (различные жидкости) или принимаемая еда. Время структуризации - 2-3 минуты. Посуда устанавливается на рабочую поверхность (обе поверхности являются рабочими).

Если на рабочую поверхность КФС ничего не ставить, но при этом вокруг прибора расположить несколько ёмкостей с водой (например, три чашки с чаем), то воздействие КФС будет распространяться сразу на все близко расположенные сосуды с жидкостью. Время структуризации чуть дольше - 4-5 минут.

* Обращаем ваше внимание, что указано минимальное время, необходимое для структуризации. Структурировать воду на КФС можно сколь угодно долго.

4. Для больших объемов стоячей воды

Обращаем внимание, что в воду КФС класть не надо, положите прибор на крышку, прикрепите сбоку, но не в воду. Большие объемы уже налитой (стоячей) воды (например, в баке, бочке, в надувном бассейне и т.д.) структурировать прибором КФС необходимо 10-15 мин, затем резко постучать несколько раз по ёмкости, чтобы информация передалась всему объему жидкости.

Также следует поступать, если заряженная вода стоит долго – необходимо воду встряхнуть, так как вода «хватает» информацию магнитных и др. полей. Структура от КФС никуда не денется, так как она динамически устойчивая, но при встряхивании «лишняя» насыщенная структура мгновенно осыпется, останется только то, что вы структурировали.

Кроме того, структурированная на КФС вода обладает способностью при соединении в общей емкости с неструтурированной водой мгновенно передавать ей свою структуру и содержащуюся в ней информацию, при этом желательно воду перемешивать или опять же резко постучать по емкости. Таким образом, налив небольшое количество (например, 1 литр) структурированной на КФС воды в ванну и помешав воду рукой, Вы получите целую ванну структурированной воды.

2. Коррекция функционального состояния любого биологического объекта (человек, животное, растение)

Коррекция функционального состояния - исправление нарушений в функционировании основных систем организма (нервной системы, сердечно-сосудистой, мочеполовой, дыхательной, желудочно-кишечной, эндокринной, кожной, костно-мышечной и т.д.)

Перед тем как начать пользоваться КФС для восстановления утраченного здоровья, создатель пластин Кольцов С.В. рекомендует пройти курс лечения (если это необходимо) у остеопата или мануального терапевта, так как позвоночник – основа нашего организма, а при неправильном положении какого-либо из позвонков движение и распределение энергии по организму может быть затруднено, и любое лечение может не принести желаемого результата.

Живое отличается от неживого тем, что может приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды. Поэтому мы выжили. Способность к адаптации заложена у всего рода человеческого, и она примерно одинакова у всех. Болезнь – это дисбаланс, сбой в гармоничном отношении организма с окружающим миром.

КФС меняет вокруг себя пространственно-временную структуру, создает вихревое магнитное поле в виде вложенных торов (форма толстого бублика - такую же форму имеет магнитное поле Земли). Если объект пересекает границу любого из торов, то будет происходить обработка от КФС. В области до 11 см достаточно много активных границ торов. Далее всё реже и реже. Точно есть на следующих расстояниях: 5,5 см, 11 см, 22 см, 160 см, 800 см, то есть спектр из торов дискретный и при большом удалении можно попасть между их границами, тогда воздействия вообще может не быть.

Методы применения КФС для коррекции функционального состояния:

1. Пить структурированную на КФС воду в достаточном количестве. - *Обязательно!*
2. Носить при себе КФС (в зависимости от решаемой задачи)
3. Водные процедуры со структурированной на КФС водой (умываться, принимать душ, ванны, местные ванны, обтирания, закаливание и т.д.). - *По мере необходимости.*
4. Восстановление энергетического состояния организма (проводить «прокачку» позвоночника, всей костно-мышечной системы, сосудистой системы и энергетических центров организма при помощи одного, двух и более КФС). - *Очень желательно!*
5. Водные оберты. - *По мере необходимости.*
6. Применение КФС совместно с различными физиотерапевтическими приборами, в т.ч. домашними. - *По мере необходимости.*

7. Применение мазей и кремов, заряженных на КФС. – По мере необходимости.

8. Возможно адресное информационное воздействие на человека с помощью КФС через его фотографию, его волосы или ногти. - По мере необходимости.

9. Оздоровление животных и растений. – Желательно.

1. Пить структурированную на КФС воду в достаточном количестве.

Обращаем ваше внимание, что оздоравливающее действие на организм происходит через воду или любую другую водную среду, обработанную на КФС. В результате чего вода становится структурированной, физиологичной нашему организму, с легкостью очищая наши клетки и межклеточное пространство от вредных отработанных веществ и позволяя быстро наполнить организм здоровьем и энергией. Поэтому основным способом коррекции функционального состояния является **употребление структурированной воды в достаточном количестве, а именно 30 мг на 1 кг веса**, то есть если человек весит 60 кг, то в день ему надо выпивать не менее $30 \text{ мг} \times 60 = 1800 \text{ мг} = 1,8 \text{ л}$ чистой структурированной воды.

Врачи рекомендуют обязательно принимать с утра натощак 1 стакан **теплой** структурированной воды ($t^{\circ}\text{C}$ примерно $35\text{-}40^{\circ}\text{C}$ – быстрее усваивается), затем в течение дня между приемами пищи **дробно** по 50-70 мл или более, доводя количество жидкости до необходимого объема. Чем чаще пить понемногу, тем лучше для организма.

**При длительном и стабильном приеме достаточного количества структурированной воды, когда вы уверены, что ваши клеточки прошли хорошую детоксикацию, в воду при питье можно добавлять небольшое количество кристаллов морской (лучше йодированной) соли, приблизительно 1/2 ч.л. на 3 л воды (или по вкусу). Это связано с тем, что наша кровь имеет близкий по составу с морской водой минеральный состав, то есть основная передающая среда в организме является, по сути, сложным солевым раствором, то есть электролитом.*

**Для людей, имеющих тяжелые и хронические заболевания, для беременных, пожилых и людей с выраженной эндотоксемией начинать оздоровление необходимо по особой схеме, приведенной ниже (стр. 24-26).*

2. Носить при себе КФС (в зависимости от решаемой задачи) или класть рядом.

При любых болях, воспалительных процессах, при ранах, ожогах и т.д. прикладывать КФС локально к прямой проекции жалобы. Носить при себе КФС на проблемном месте, на месте локализации боли, в проекции больного органа или просто в кармашке для профилактики. Напоминаем, что на область сердца прикладывать КФС не надо! Периодически необходимо менять место локализации КФС на теле. На ночь рекомендуется КФС снимать, но не обязательно – смотреть по самочувствию. На стопах и ладонях много биологически активных точек – полезно к ним прикладывать КФС. Детям удобно сшить матерчатый кармашек на веревочке специально для КФС или закрепить на широкой резинке на поясе. К больным конечностям КФС можно привязать широким бинтом или закрепить специальной эластичной повязкой.

Общие рекомендации ношения КФС на теле:

- с утра и до 16.00 носить любой КФС (1,3,4,5,6,7), после 16.00 носить КФС №2;
- КФС №8 можно класть на ночь рядом с собой, под подушку (или под ноги, если проблемы с сосудами головного мозга);
- КФС №1, 2, 3, 4, 5 для профилактики целесообразнее носить в области живота (или по индивидуальным проблемам, в области боли или поражения);
- КФС №3, 4 при гормональных проблемах носить на сакральной чакре (точка 2, рис.1 на стр.14) и на макушке головы - на проекции гипоталамуса-гипофиза;
- КФС №5 при проблемах с печенью или с желудочно-кишечным трактом - в области правого подреберья;
- КФС №6, 7 при сосудистых патологиях можно прикладывать под колени, на внутреннюю сторону локтя, в паховую область, при суставных болях на локализацию боли.

3. Водные процедуры со структурированной на КФС водой.

Принятие душа или ванны со структурированной на КФС водой дает огромный положительный эффект, поскольку через кожу при принятии 10-15 минутной ванны всасывается до 300-400 г жидкости. Для этого размещаем КФС на кране, смесителе или трубе, где проходит поток (вода структурируется мгновенно). Или структурируем воду любым другим способом

Особенно водные процедуры эффективны при кожных заболеваниях, при синдроме усталости. Но вы должны индивидуально определить, в какое время суток вам лучше принимать ванны. У одних эта процедура вызывает прилив сил, бодрости - в этом случае целесообразнее принять утром или днём. У других идёт расслабление, располагает ко сну, в этом случае принимать перед сном.

Очень полезно принимать ванны со структурированной водой с добавлением различных настоев и отваров из трав или хвои, с морской солью, с молочной сывороткой, с различными ароматическими маслами и т.д., очень полезны также добавки скипидарных растворов и эмульсий для ванн по А.С. Залманову.

**При использовании трав обратите внимание на их лечебное действие и их противопоказания (успокаивающее, тонизирующее, противовоспалительное и т.д.).*

ВАННЫ принимаются 2-3 раза в неделю или ежедневно при комфортной температуре воды 37-40°C, продолжительность процедуры - 10-15 мин. Во время процедуры рекомендуется массировать проблемные места руками или не синтетической губкой.

Если вы чувствуете, что начинаете заболевать, и у вас поднимается температура, принимайте каждые 2 часа ванны с теплой структурированной на КФС №1 водой (3-4 раза за световой день). Это укрепит ваш иммунитет и поможет сбить лихорадку.

Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и людям старше 70 лет вместо ванн показаны теплые обтирания, душ, обливания или местные ванны (для ног;

для рук) при комфортной температуре воды 37-40°C. После ванны на ноги и руки нанести детский (или ваш любимый) крем, структурированный на КФС. Местные ванны со структурированной на КФС водой полезны при заболеваниях суставов, при кожных проблемах, при сосудистых патологиях.

ОБТИРАНИЕ теплой структурированной водой всего тела можно проводить утром и вечером с помощью жесткой не-синтетической губки. Очень полезная процедура для лежачих больных. Как закаливающая процедура - используется холодная вода. При высокой температуре, особенно у детей, рекомендуется обтирание водой, структурированной на КФС № 1 или 2.

ОБЛИВАНИЕ: проводят при противопоказаниях ванн или при отсутствии душа теплой или холодной водой.

ЗАКАЛИВАНИЕ: смочить махровое полотенце структурированной на КФС №1 водой, скатать в трубочку и заморозить в морозильной камере. Ходить с малышами босиком по полотенцу от 30 сек до 1 мин, не дольше.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ЛЕД: раствор 1 ч.л. морской соли на 1 ст. структурированной на КФС №6, 7, 8 воды, в который можно добавить сок 1/2 лимона, заморозить в формочке. Кубики льда использовать по утрам вместо умывания для лица, шеи и декольте. Мощный косметический эффект.

4. Проводить «прокачку» позвоночника, всей костно-мышечной системы, сосудистой системы и энергетических центров организма при помощи одного, двух и более КФС (можно использовать любые КФС).

Для активизации всех процессов в организме и усиления эффекта действия КФС необходимо ежедневно делать так называемые «прокачки»: минимально - прокачку для костной и сосудистой системы (I) и прокачку всех энергетических центров (II).

Прокачка костной и сосудистой системы (I):

Для этого необходимы два КФС. Схема такова:

Положить один КФС под левую ногу (под ступню у пальцев), второй взять в правую руку (всеми пальцами) на 2-5 минут.

Поменять положение, т.е. переложить первый КФС под правую ногу, а второй взять в левую руку. Длительность 2-5 минут. Можно начать с правой ноги и левой руки, с переходом на левую ногу и правую руку.


Прокачка всех энергетических центров (II).

Для этого необходимы два КФС. Схема такова:

Лучше всего сесть (в крайнем случае, можно полулежа). Один КФС (лучше №2) положить под копчик и держать во время всей прокачки под копчиком.

Второй КФС перемещать по энергетическим центрам организма (чакрам), начиная снизу, задерживаясь на каждой точке по 1-2 минуты:

рис. 1

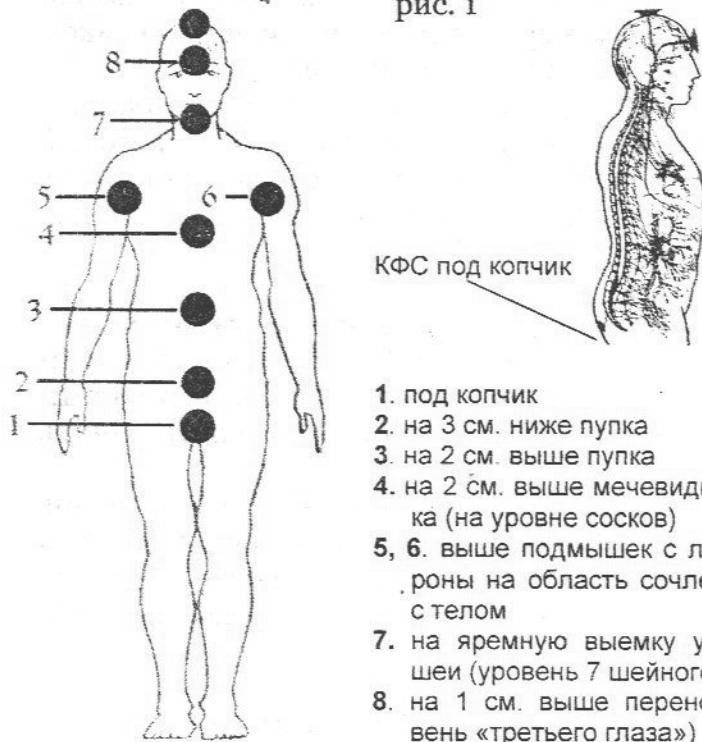

Эту процедуру желательно повторять утром и вечером, по самочувствию можно повторять в течение дня. Имейте в виду, что после прокачки уровень энергетики организма резко повышается, поэтому страдающим бессонницей людям прокачку лучше проводить не на ночь, а за несколько часов до сна.[5].

Прокачка позвоночника двумя КФС

Если у вас мало времени, то делайте прокачку костной системы, поместив один КФС под копчик, а второй на 7 шейный позвонок на 3-10 минут. Эффективность такой прокачки будет поменьше, но всё-таки будет.

Прокачка одним КФС

Если у вас только один КФС, то прокачка будет не очень эффективной, но делать ее все-таки нужно. Потребуется помочь еще одного человека.

Прокачка энергетических центров: необходимо лечь или встать таким образом, чтобы позвоночник был прямой. Ваш помощник должен медленно вести прибором КФС вдоль спины по позвоночнику, останавливаясь по 1/2-2 мин на проекциях энергетических центров. Начинать с копчиковой зоны и заканчивать шейными позвонками. Затем самому взять КФС в руки, как при молитве, и вести также медленно снизу вверх вдоль энергетических центров, заканчивая уровнем «третьего глаза».

Если нет помощников, можно посидеть 5 мин, положив КФС под копчик, потом переложить на 7 шейный позвонок на 5 мин.

Прокачка костной и сосудистой системы: прокачать руки-ноги наискось по 5 мин поочередно (см. стр. 13).

Для усиления эффекта включите расслабляющую музыку, попробуйте медитировать.

Энергетическая прокачка в экстренных случаях

Когда необходимо человека быстро привести в норму (например, после публичного выступления или при потере сознания) можно воздействовать сразу несколькими КФС:

1 вариант – расположить одновременно сразу 4 КФС соответственно на обе кисти и обе стопы лежачего человека, держать 10-20 минут. Затем положить КФС на затылок. Хорошо действует при потере сознания.

2 вариант – расположить 3 КФС в положении лежа: один КФС поместить под копчиковую зону (нижняя чакра - точка 1, рис.1 на стр. 14), второй – на зону солнечного сплетения (точка 4), третий КФС – на зону «третьего глаза», можно на горловую чакру (точки 7 или 8). Хорошо действует при энергетических пробоях (резко начинает болеть голова, проявляется слабость, наблюдается путанность сознания, опустошенность и т.д.).

Усиленная прокачка для людей с сильно разбалансированной энергетической системой

Для этого используется 4 КФС. Три из них складываются треугольной конструкцией, как показано на рисунке 2. Один КФС кладется под копчик. Схема прокачки та же, что описана на стр. 14 «Прокачка всех энергетических центров организма». Отличие лишь в том, что в качестве второго КФС используется треугольная конструкция из этих приборов.

рис. 2


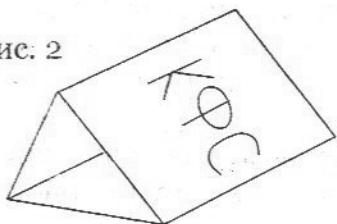


рис. 3

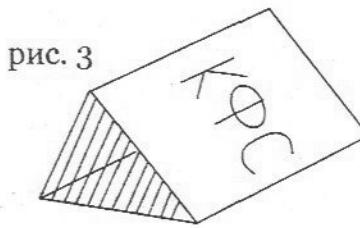

Временно скрепить таким образом 3 КФС можно, например, при помощи скотча или при помощи резинки.

Прикладывать конструкцию к телу областью, которая на рисунке 3 заштрихована. Время экспозиции на каждой точке может составлять до 10-20 минут.

Прокачка локального проблемного места

Необходимы 2 КФС – расположение одного из приборов под копчиком, другой располагается над проблемной зо-

ной – на месте патологического процесса в органе или в проекции боли (кроме области сердца). Продолжительность каждого пункта прокачки может варьироваться от 1/2-3 мин. Например, при больной печени второй КФС прикладывать к проекции печени, при маточных болях – к проекции матки и т.д.

Прокачивать такие парные органы, как почки можно также двумя КФС, положив их со стороны спины на проекции органов на расстоянии примерно 15 см друг от друга на 3-5 минут.

5. Водные обертывания

Водные обертывания применяются как мощное средство, выводящее токсины через кожу. Оказывают благотворное исцеляющее воздействие при температуре, при воспалительных болях, при кожных проблемах, при болях в суставах, при заболеваниях внутренних органов, улучшается кровоснабжение в тканях [7].

Водные обертывания проводятся по общей схеме: натуральная холщовая или льняная ткань (длинная рубаха, «испанский плащ») смачивается горячей структурированной на КФС водой, отжимается и мокрой немедленно одевается на больного, которого быстро укладывают в постель на шерстяное одеяло и укутывают без доступа воздуха ватным одеялом. Процедура длится от 1 до 2 часов. Затем надеть чистое сухое белье. Используемую ткань (рубаху, «плащ») прокипятить и прогладить. Для усиления эффективности вывода токсинов в воде можно растворить немногих кристалликов морской соли. Укутывать можно все тело целиком (одевается «испанский плащ» - халат с длинным рукавом и ниже пят из грубого полотна) или только туловище (длинная полотняная рубаха), можно проводить обертывание только рук или ног, головы, шеи (полотенце или махровая простыня). Обертывание – это древний славянский способ лечения росой, собранной во время праздника Ивана Купалы.

6. Применение КФС совместно с различными физиотерапевтическими приборами, в т.ч. домашними.

Любой физиотерапевтический прибор, в т.ч. домашние приборы (например, инфракрасная лампа, дарсонваль, массажеры, магнитотерапевтические, вибраакустические приборы и т.д.) совместно с любым КФС дают усиление своего лечебного воздействия на организм человека. Эффект от терапии наступает в несколько раз быстрее, требуется меньшее количество сеансов. Поскольку, если физиоприборы дают телу тренировку нервно-мышечных связей, то КФС гармонизирует структуризацию внутренних водных сред организма, то есть информационную составляющую. И вместе действие приборов будет на порядок эффективнее. Для этого класть КФС на выходной каскад модулирующего внешнего физического поля или на подводящий кабель физиоприбора.

7. Применение мазей и кремов для оздоровления

При кожных заболеваниях, при заболеваниях суставов, при некоторых сосудистых патологиях, воспалительных заболеваниях не обойтись без наружных средств применения, часто довольно дорогих. Многие из них с успехом смогут заменить обычный детский крем, обработанный на КФС. При общем плохом самочувствии, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях, рекомендуется утром и вечером смазывать структурированным на КФС кремом ноги до колен, руки до локтей [3].

Не забывайте применять крема и другие косметические средства, активированные на косметических КФС №6, 7, 8.

8. Возможно адресное информационное воздействие на человека с помощью КФС через его фотографию, его волосы или ногти.

В случае, если у кого-то из Ваших близких нет прибора, особенно в экстренной ситуации, можно воздействовать корректором дистанционно. Поскольку фотография – это готовый образ человека (на которого нужно воздействовать), то есть готовая многочастотная картинка, которая

идентифицирует объект воздействия, то можно адресно работать по фотографии. На фото человека, которому необходима помощь, можно класть любой КФС. Минус при работе с фото в том, что транслироваться будет один и тот же эмоциональный фон, тот, который на фотографии (то есть тот, который остался запечатленным на амальгаме пленки), и еще фото запоминает все кармические отработки, свойственные данному человеку (венец безбрачия, проклятье по седьмое колено и т.д.). Энерго-информационное воздействие будет адресное, но однобокое, поэтому только в случае крайней необходимости (инфаркт, кома и т.д.) и только ближайшим родственникам, ну или себе. К тому же это должны быть фотографии не ранее 2008 года (так как сейчас другая динамическая реальность), фото должно быть не цифровое (не напечатанное на принтере), а плечочное, и лучше всего черно-белое. [4]

Альтернатива образу фото – клочок волос. Это природный волновод со структурой ДНК (адресное воздействие), то есть это линия связи с конкретным человеком. Сложить их в бумагу и на бумаге прописать ФИО человека, его дату рождения и положить на прибор. Воздействие будет дистанционное! Если вы хотите пользоваться этим же КФС, то временно клочок волос уберите, зарядите воду для собственных нужд, потом опять положите волосы.

9. Оздоровление животных и растений.

Поить домашних животных и птиц структурированной водой, обрабатывать им на КФС не сухую пищу. Рыбкам структурировать воду в аквариумах. Происходит поддержание иммунной системы через воду. На КФС № 1 – избавление от паразитов, глистов, блох и т.д. Использовать КФС при уходе за растениями: обрабатывать семена перед посадкой, поливать огород «заряженной» водой, поливать и опрыскивать комнатные растения.[4]

3. Защита от различных электромагнитных, геопатогенных, социопатогенных излучений.

Как не парадоксально, но наш дом постепенно превращается не в “мою крепость”, а в электрическую камеру пыток, напичканную современными электромагнитными орудиями — бытовыми электроприборами. Это один из самых мощных факторов, разрушающих наше здоровье! При этом наибольший вклад в электромагнитную составляющую нашей крепости вносят электротехническое оборудование здания и кабельные линии, в т. ч. распределительные щитки в подъездах домов. Кто-нибудь считал количество электропроводов тянувшихся в квартире от электроприборов? А воздействия от них немалое. Следует помнить, что особенно чувствительны к негативным факторам беременные, дети и пожилые люди. Причем каждый человек обладает индивидуальной чувствительностью к электромагнитным излучениям. То, что не влияет на здоровье у одного — может вызвать недомогание у другого.

КФС защищает от любого электромагнитного излучения. Это и работающее электрооборудование, и геопатогенные зоны, и энергетическое воздействие других людей. Достаточно положить его рядом с собой.

Методы применения КФС для защиты от электромагнитного, геопатогенного и социопатогенного излучения

1. Очищение пространства квартиры, дома (на электрическую проводку, на электрические приборы, побрызгать пространство структурированной водой, при влажной уборке, при приготовлении пищи)
2. Расположение КФС в геопатогенных зонах (узлах сетки Хартмана) – найти рамкой
3. Как оберег носить при себе, особенно на публике, или в автомобиле.

4. Носить при себе КФС (в зависимости от решаемой задачи), пить воду, принимать душ или ванну, проводить «прекаечку» позвоночника и энергетических центров.
5. Очистка вещей, украшений, одежды от негативной энергетики.
6. Заряжать деньги, амулеты.

1. Очищение пространства квартиры, дома

Структурированная вода с информацией от КФС №1 или №2 при влажной уборке домашних помещений гармонизирует пространство и удаляет отрицательные социопатогенные влияния (мыть пол, окна структурированной водой), побрызгать из пульверизатора все углы, стены, потолок, ковры, мебель, все труднодоступные места и т.д. Проводить такую обработку периодически, особенно при наличии в доме негативной атмосферы или, например, плесени. Поместить прибор КФС на электрическом счётчике или на входящем в дом (квартиру) кабеле и на полчаса включить во всех комнатах свет: негативное электромагнитное излучение всей бытовой техники и электросетей КФС преобразует в гармоничное пространство, поляризованный свет очистит пространство квартиры или дома.

Если положить КФС на подводящий электрический кабель к чайнику или к электроплитке (или на подводящую газовую трубу), то всё, что вы будете готовить, попадет в область поляризации КФС, и готовящаяся пища изначально будет структурирована, тогда не надо будет структурировать еду в тарелке.

Вообще целесообразно один из КФС положить на входящий электрический кабель, один на газовую трубу, один на водопроводную трубу, тогда вы получите максимальный защитный эффект от КФС.

2. Расположение КФС в геопатогенных зонах

Чтобы защитить свой дом от геопатогенных излучений, необходимо пройтись по нему с рамкой и определить места, где есть пересечения сетки Хартмана (хорошо, если это сделает специалист). Если в пространстве вашего дома на-

шлись любые геопатогенные зоны, то надо положить туда КФС (или конструкцию из трех КФС – см. рис.2 на стр. 16). Как утверждает Сергей Валентинович Кольцов, узлы сетки Хартмана сдвигаются на несколько километров, а в случае с треугольной конструкцией - на несколько десятков километров.

3. Как берег носить при себе

При помощи КФС происходит автоматическая диагностика и коррекция ауры человека. Отсекается отток либо приток чужеродной негативной энергии. Достаточно носить его при себе. При плохом самочувствии после нахождения рядом с негативно настроенными людьми (или в толпе) необходимо принять душ и сделать прокачку энергетических центров.

4. Вне дома носить при себе КФС, пить воду, проводить «прокачку», брать с собой в путешествие.

Не следует забывать, что не только наш дом подвержен атаке электромагнитных излучений, но и все дома вокруг, офисы, школы, поликлиники, магазины, заводы, даже на даче где-то рядом тянутся электрические провода от высоковольтных линий. Мы живем в век электричества. Поэтому всюду необходимо носить с собой КФС и, что более важное, давать КФС детям! Приучайте их пить структурированную на КФС воду, а не сладкую газировку, помогите растущему неокрепшему организму справиться с агрессивной окружающей средой. Лучшее лечение – это профилактика!

5. Очистка вещей, украшений, одежды от негативной энергетики.

Наша одежда, вещи способны наслаждаться любую информацию. Вещи имеют свойство пропитываться энергией самого хозяина: его эмоциями, его состоянием здоровья, мыслями. Практически невозможно ликвидировать информацию о мертвом человеке с его одежды. Если вы были больны – то ваша одежда, в которой вы находились в это

время, сохраняет эту информацию. И уже, будучи здоровым, надев такую вещь, вы можете плохо себя чувствовать, не догадываясь о причине. Раньше одежду больного или умершего человека сжигали, так как не знали как избавиться от этих наслоений. Теперь просто достаточно положить КФС на одежду, чтобы снять такого рода наложения, или вы можете при стирке одежды, постельного белья и т.п., поместить КФС на водопроводные трубы, на стиральную машину или поставить на него другую ёмкость, которую используете при стирке или полоскании.

Для очистки вещей, украшений просто положите на них любой КФС на ½ часа, можете при этом включить свет, поляризованный КФС, негативная информация просто «перемолотится» (очистится), а вместо нее останется гармоничная и физиологичная (родственная нашему организму) лечебная информация.

6. Заряжать деньги, амулеты

На растущую Луну (на молодой месяц) на ночь положить в кошелек с крупной купюрой прибор КФС №1. В дальнейшем эту купюру не трогать, держать в кошельке для прятывания денег, т.к. на КФС №1 прописана программа на процветание.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КФС

! Пользоваться различными КФС и их комбинациями постоянно и всеми возможными способами; оздоровливать не только себя, но и свое жизненное пространство.

Особенности начального этапа использования КФС для людей с тяжелыми, хроническими заболеваниями, для беременных, пожилых и больных с выраженной эндотоксемией:

Разработчик С.В. Кольцов и компания Центр-регион рекомендует при тяжелых и хронических заболеваниях воспользоваться консультацией врача-специалиста и проводить оздоровление прибором КФС под его наблюдением, используя различные диагностические методики и ни в коем случае резко не отменять лекарственную терапию. КФС позволяет постепенно снизить дозу принимаемых лекарств, а в некоторых случаях и отменить их, но только под наблюдением врача!

Во избежание «бурных» реакций организма, и если вы решили проводить курс оздоровления самостоятельно, то для вас врачами были разработаны рекомендации ступенчатого начального этапа использования КФС. [2]

1 ступень: прием воды с **КФС №2**, постепенное доведение количества воды до половины нормы.

1 день – прием структурированной на **КФС №2** воды (по 100-200 мл 2-3 раза в день).

2 день и далее несколько дней по самочувствию - прием структурированной на **КФС №2** воды в количестве 15-20 мл на 1 кг веса в сутки (по 2-5 глотков каждые 5-10 минут).

2 ступень: доведение количества принимаемой воды до нормы, подключение водных процедур в виде душа, ношение **КФС №2** и применение крема.

*Прием структурированной на **КФС №2** воды в количестве 20-30 мл на 1 кг веса в сутки (дробно).

*Ношение **КФС №2**, можно круглосуточно.

*Смазывание структурированным на **КФС №2** кремом ладоней и (или) стоп по типу перчаток и носков.

*Водные процедуры с **КФС №2** (предпочтительнее душ, водное обертывание)

*Применение физиотерапевтических приборов совместно с КФС (при назначении врача)

Продолжительность 2 ступени для пациентов:

-35-40 лет без сопутствующей токсемии: 3-5 дней;

-45-60 лет и лица с выраженной сопутствующей патологией и (или) токсемией: 10-15 дней;

-70-80 лет: 15-20 дней.

3 ступень: работа с базовым комплектом **КФС - №1, 2.**

*Прием структурированной воды на **КФС №1** с утра и до 16.00, и на **КФС №2** после 16.00 (в общем количестве 20-30 мл на 1 кг веса в сутки).

*Ношение **КФС №1** до 16.00 и **КФС №2** после 16.00.

*Смазывание структурированным на **КФС №1,2** кремом ладоней и (или) стоп по типу перчаток и носков.

*Водные процедуры с **КФС №1** утром и до 16.00 и с **КФС №2** после 16.00 (умывание, душ, ванны, местные ванны, обертывание)

*Проведение «прокачек» энергетических центров, сосудистой и костной системы (сначала через день, затем каждый день).

*Проведение «прокачки» проблемной зоны: один КФС под копчик, другой - на месте патологического процесса в органе или в проекции боли (кроме области сердца), ½-3 мин. Следует также научиться прислушиваться к своему организму: появление неприятных или болевых ощущений в ходе прокачки является сигналом к прекращению воздействия на эту зону.

*Применение физиотерапевтических приборов совместно с КФС (при назначении врача)

Продолжительность 3 ступени в среднем 2-4 месяца.

4 ступень: переход к дальнейшему решению системных проблем с помощью использования приборов №1-8 (общие рекомендации).

«Шаг назад» (возврат к предыдущей ступени) производим при появлении любого выраженного дискомфорта на срок, необходимый для устранения дискомфорта, при этом желательно с увеличением объема потребляемой воды.

СПЕЦИФИКА РАЗЛИЧНЫХ КФС

Существует несколько разновидностей приборов, отличающиеся дополнительной информацией, заложенной (записанной) на них, это:

№1-прибор КФС антипаразитарный, гармонизирующий,
№2-прибор КФС с программой "детоксикация" (очищение),

№3, №4 - приборы КФС с программой коррекции эндокринной системы (снижения веса) в женском и мужском варианте,

№5 – прибор КФС с реабилитационной программой,

№6, №7, №8 – приборы КФС с косметической программой.

Базовыми для оздоровления являются КФС №1, №2.

№1 используется в первой половине светового дня (приблизительно до 16.00-17.00), №2 используется во второй половине дня (после 16.00-17.00) - в таком режиме нужно пить воду, носить КФС при себе, принимать водные процедуры, применять с другими физиотерапевтическими приборами и т.д. в течение 3-4 недель, не менее.

Присоединив к базовым КФС №3 (4), вы охватите фактически все функциональные системы организма человека. Общая нормализация обмена веществ, повышение гормонального статуса (женская и мужская половые сферы соответственно).

Специфика пластины №5 помогает избавиться от психологических зависимостей (алкоголь) и восстановить печень и всю систему желудочно-кишечного тракта.

КФС №6, 7, 8 – также достаточно специфические (косметологические), но, как и весь наш организм, эти пластины

не отдельная глава, а нечто целое, как книга, то есть пластины системные, поэтому применяются не только для обработки косметической продукции. Поскольку внешняя безупречность несущественна без здоровья и внутренней гармонии.

Все пластины независимо от программ, записанных на них, имеют **общие свойства**:

- создают (генерируют) благотворное для организма пространство, под воздействием которого происходит структуризация воды или других жидких сред. При этом значительно повышается качество внутренней структуры употребляемой воды и продуктов питания, БАДов и лекарств. В связи с этим многократно уменьшается побочное действие принимаемых лекарств

- помогают значительно улучшить большинство показателей состояния здоровья, нормализуют окислительно-восстановительное равновесие, водно-солевой и кислотно-щелочной баланс крови, а значит и нормальную активность гормонов и ферментов в организме человека, поднимают иммунитет, регулируют обмен веществ

- улучшают настроение, повышают энергетику организма, выносливость и приспособляемость людей к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды:

- защищают человека от вредного воздействия электромагнитных полей мобильных телефонов, компьютеров, СВЧ печей и любой другой бытовой электротехники;

- противодействуют социопатогенным воздействиям (сглаз, порча и т.д.), полностью все эти темы прописаны на №1-4;

- устраняют воздействие геопатогенных зон;

- способствуют снятию стресса, напряженности, усталости, придают сил, выводят из депрессии, действуют гармонизирующее на психоэмоциональный фон человека и поддерживают положительный настрой в семье, привлекают всё хорошее

- нормализует биоритмику работы головного мозга, центральной нервной системы и всех внутренних органов. КФС

согласует функционирование обоих полушарий головного мозга. За счет этого у человека активизируются творческие способности, улучшается усвоение нового материала

Энергетически слабый человек подобен ожоговому больному. Площадь ожога является важным показателем выживаемости человека, так и площадь разрушенного биополя является жизненно важным показателем. И в том и в другом случае, чем больше площадь поражения, тем она смертельно опаснее. Всемирная организация здравоохранения признала, что большинство болезней человека являются психосоматическими, то есть имеют психологическую основу. Каждый из нас рожден с определенной генетической программой. Тело наше - носитель этой программы. Диссонанс в согласованной работе психоэнергетического и физического тела приводит к болезням. Фактически, традиционная медицина лечит лишь следствие, убирая симптомы болезней, как результат патологических изменений в теле, но не затрагивает их причину. Если в автомобиле разрядился аккумулятор, что будет делать опытный водитель? Менять масло, свечи зажигания, заливать бензин? Конечно же, нет! Он зарядит аккумулятор! Об этом знают все. Но современная медицина начинает лечить человека, не восстановив его энергетических центров, его энергетику. И какими не были бы качественными и сильными лекарства, витамины, БАДы, они не смогут полностью усвоиться организмом при блокировке энергии. Бессмысленно лечить тело, не восстановив энергетику. КФС с успехом справляются с этой задачей в самые короткие сроки, восстанавливая ауру и поддерживая необходимый для здоровья баланс всех функциональных систем организма. Делайте прокачки с КФС!

КФС№1 - антипаразитарный, гармонизирующий.

№1 - прибор КФС с антипаразитарной программой, его еще называют «гармонизирующий». По богатству и разнообразию записанной на КФС №1 информации - это уникальный

базовый прибор с широким спектром действия на организм.

Обеспечивает постепенное угнетение и гибель в организме человека и животных паразитов, глистов, вирусов, простейших, болезнетворных бактерий, всей патогенной флоры (стафилококки, стрептококки, хламидии, трихомонады, возбудители герпеса, кандиды, токсокары, лямблии, аскариды, вирусы гриппа и мн. мн. др.). Сегодня уже имеются пациенты, у которых после использования КФС №1 не тестируется ВИЧ-вирус и вирус гепатита С, а также имеется много других уникальных результатов. При этом КФС №1 никого не убивает, чужеродным организмам просто становится некомфортно (это означает, что они не могут размножаться, поэтому постепенно гибнут без потомства, и выводятся из организма без последствий). [6]

КФС №1 – одна из базовых пластин, так как, по новым медицинским данным, многие тяжелые хронические заболевания имеют в своей основе паразитарную природу, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые (тромбофлебит, инфаркты, инсульты), онкологические заболевания, некоторые формы бронхиальной астмы, аллергия и мн. др. На сегодняшний момент Минздравом не уделяется должного внимания противогельминтной и противопаразитарной профилактике населения, ведется она только в местах вспышек этих заболеваний. Между тем мы можем являться носителями многих паразитов и даже не догадываться об этом. Где-то недолеченные, где-то подхваченные, они выступают хозяевами жизни в нашем организме и тихо съедают нас изнутри, разлагают наши клетки, ткани, органы, выбрасывают нам в кровь отходы своей жизнедеятельности и вызывают множественные патологии от аллергии и бессонницы до рвоты и поноса. А ведь существует еще и скрытая паразитарная инфекция, которая не проявляет себя явно и поэтому остается вне поля зрения. И потом мы начинаем болеть, а медицина не может определить причину недомоганий. И наша задача – справиться с ними и, что намного важнее, проводить постоянную профилактику, особенно детям! Поэтому КФС №1 должна быть в каждом доме и семье.

Уникальность КФС №1 еще и в том, что его информация сложилась исторически, и тут присутствует огромное количество лечебных растительных форм, минералов, прописаны темы аюрведических препаратов, энергия с «мест силы» нашей планеты, темы, разработанные Масару Эмото, образы гармонии, любви, процветания. На нем прописаны комплексы тем, для того, чтобы помочь организму справиться с такими заболеваниями как воспалительные заболевания, любые инфекционные поражения (герпес, насморк, мочеполовые инфекции, глазные, бронхо-легочные, желудочно-кишечные инфекции, грипп, гепатит и т.д.). Вписаны иммуномодулирующие программы, программы для восстановления сердечно-сосудистой, нервной, бронхолегочной систем, поджелудочной железы, эпифиза, надпочечников, вилочковой железы, системы кровообращения, обмена веществ и т.д. В целом КФС №1 - гармонизирующая программа, родственная действию очень мощных биоэнерготерапевтов (это подтверждено в лаборатории С.В. Зенина). Имеет исцеляющее воздействие на все системы и органы на клеточном уровне. Без нее не проходит ни одна программа оздоровления с помощью КФС.

- способствует нормализации микрофлоры кишечника
- нормализует работу иммунной системы (вписана программа восстановления вилочковой железы (тимус) - центральный орган иммунной системы, который закладывается в детстве и постепенно угасает после 30 лет)
- улучшает мозговое кровообращение
- профилактика и лечение опухолевых процессов
- нормализует обмен веществ
- мощный антидепрессант
- гепатопротекторное действие
- бронхо-легочные заболевания, в т.ч. бронхиальная астма
- сахарный диабет или выраженные проблемы поджелудочной железы
- сердечно-сосудистые заболевания
- настраивает на гармонию, терпение и терпимость, любовь к себе, окружающим и процветание

КФС№2 — детоксикация (выведение токсинов)

КФС №2 – вторая из базовых пластин для восстановления здоровья и одна из самых необходимых, т.к. она активизирует естественные функции выведения организма. И это не обычное выведение шлаков и токсинов, а мощная очистка клеток и тканей. Так, при инфекционных и воспалительных заболеваниях в организме резко усиливается интоксикация (самоотравление), и чтобы легче и быстрее вывести из клетки и из межклеточного пространства продукты распада, надо пить достаточное количество воды, структурированной на КФС №2. Если клетка заблокирована шлаками, то она не получает информацию от других клеток и у нее сбивается ритм функционирования, тогда в панике она начинает активно пытаться и размножаться, а это уже может перерасти в онкологию, т.е. чужеродный процесс.

В соответствии с суточными ритмами в нас с утра начинаются закисляющие процессы, – организм готовится к поглощению и перевариванию пищи, что является одной из основ получения энергии и необходимых веществ для жизнедеятельности. А во второй половине дня начинают преобладать восстановительные процессы, организм готовится к полноценному ночному отдыху. В народе давно говорят: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врачу. С утра надо получить энергию для активного дня, в обед немного поддержать силы, а на ночь лучше не есть, так как начались восстановительные процессы, и все, что мы будем потреблять, будет только откладываться про запас (в ненужный жир). И для того, чтобы восстановление организма происходило быстрее, КФС№2 целесообразно применять во второй половине светового дня, когда начинаются процессы восстановления (пить воду, принимать водные процедуры, носить при себе, применять с физиотерапевтическими приборами и т.д.).

КФС№2 – это еще и колossalная поддержка внутренних органов, через которые происходит детоксикация. Очищаются почки и защищаются почки, т.к. при интоксикации при инфекциях они сильно закисляются, а структуриро-

ванная на КФС вода имеет слабо-щелочную реакцию. Очищается кровь, улучшается кровообращение в тканях, быстро уходят головные боли. Врачи знают, что очистить лимфу очень трудно. КФС№2 прочищает лимфодренажную систему, сосудистую систему, печень. Снимает отеки и выводит продукты распада, помогает легче перенести химио- и радиотерапию, уменьшает боли в суставах. Применяется при любых воспалительных и инфекционных заболеваниях, при отравлениях (алкогольное, наркотическое и т.д.), в т.ч. в процессе жизнедеятельности, при отеках, при всех хронических заболеваниях (при сердечно-сосудистых, мочеполовых, желудочно-кишечных, эндокринных заболеваниях, восстанавливает щитовидную железу, помогает разгрузить поджелудочную железу и т.д.)

Сюда вписаны противоонкологические программы, КФС нормализует работу иммунитета и защитных функций организма, регулирует обмен веществ

-стимулирует выведение шлаков и токсинов из организма
-обладает капиллярно-протекторным действием (эффективное восстановление всех сосудов и капилляров в организме, лечение всех сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе вегето-сосудистой дистонии, аритмии, тахикардии и т.д.)

-быстрая реабилитация после инсультов, инфарктов, ком, операций, тяжелых травм, после химиотерапий, ожогов, гангрен и.т.д.

-выведение песка и камней из почек и постепенное размягчение и выведение камней из желчного пузыря

-при сосудистых катастрофах, идущих с последующим некрозом тканей (быстрое восстановление особенно в начальной стадии)

КФС№3 и №4 — коррекция эндокринной системы (сжигатель излишков жировой ткани) у женщин и мужчин

№3, №4 – приборы КФС с программой коррекции эндокринной системы (снижение веса) в женском (-№3-) и мужском (-№4-) варианте.

То есть у КФС№3 и КФС №4 одни и те же функции и назначения, только учитывая гормональные особенности организма женщины и мужчины.

Эндокринная система человека - система желез внутренней секреции, это одна из основных систем регуляции организма, которая осуществляет через гормоны, имеющие высокую биологическую активность (обеспечение процессов роста, развития, размножения, адаптации, поведения). КФС №3 и 4 – это полный спектр восстановления обмена веществ от половой сферы до щитовидной и поджелудочной желез. На этих пластинах прописаны все женские (или мужские) заболевания от воспалительных и дисфункциональных до онкологии. Центральным звеном эндокринной системы является гипоталамус и гипофиз, они «прячутся» в головном мозге. Поэтому при любой дисфункции (гормональном сбое, например, при бесплодии) необходимо пластину №3 (4) иногда прикладывать к макушке на проекцию системы гипоталамуса-гипофиза-эпифиза.

Эндокринная система работает в организме совместно с другими системами, такими, например, как нервная и иммунная. И как только восстановится обмен веществ, начнет работать программа сжигания жира (у тех, кому это показано) – и внутреннего, и подкожного (целлюлит). На КФС №3,4 происходит изменение состояния жировых клеток, некоторые люди вообще не худеют, не снижают вес, но уходят объемы. Имейте ввиду, что прием алкоголя приостанавливает на 3-5 дней функцию сжигания излишков жировой ткани.

На КФС №3 и 4 прописаны программы восстановления щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы, селезенки, соответственных половых желез. При этом нормализуется месячный цикл у женщин, улучшается внешний вид, климакс идет вспять. У мужчин за счет поднятия уровня тестостерона, усиливается потенция.

-регенерация дистрофии тканей и восстановление гормонального фона женского и мужского организма.
-профилактика и лечение гинекологических заболеваний у женщин (миомы, кисты, опухоли, воспалительные заболе-

вания, эрозии, мастопатии, фибромиомы и мн. др.)
-профилактика и лечение заболеваний мужской половой сферы (аденомы, опухоли, воспалительные процессы предстательной железы, слабая потенция и мн.др.)
-лечение бесплодия мужчин и женщин (при дисфункции)
-восстановление работы эндокринной системы (заболевания щитовидной железы – гипо- или гиперфункция; поджелудочной железы – сахарный диабет, панкреатит)
-омоложение организма, уменьшение биологического возраста
-нормализация микрофлоры кишечника
-недержание мочи при воспалительных заболеваниях или при недостаточной выработке гормонов
-нормализация иммунной системы
-тормозит развитие опухолевых процессов
-улучшает мозговое кровообращение
-нормализует кислотно-щелочной баланс крови, активность ферментов и гормонов
-закупорка или плохое мочеиспускание у мужчин
-исчезновение седины

КФС№5 - реабилитационный

№5 – прибор КФС с реабилитационной программой. Дает хорошую регенерацию внутренним органам (почки, мочевой пузырь, печень, селезенка, поджелудочная железа, желчный пузырь, желудок, кишечник и т.д.). Особенно активно восстанавливает работу печени. Очень часто мы едим, принимаем лекарства, курим, принимаем алкоголь и не задумываемся, что все это разрушает нашу печень. Лекарства, БАДы, добавки пищевой промышленности – все пропускается через нашу перерабатывающую фабрику – печень. И постепенно накапливается, что приводит к ее токсическим поражениям. КФС №5 содержит усиленную программу для ускорения процессов детоксикации и восстановления печени, а также желчевыводящих путей (циррозы, гепатиты, холециститы, камни в желчном пузыре). Отдельно надо сказать о комплексе тем, предназначенных

для того, чтобы стирать с уровня психики поляризацию, свойственную запущенным алкоголикам, наркоманам и курильщикам. Причем как для мужчин, так и для женщин (отдельные темы). В такой пьющей стране, как Россия, это очень актуальная тема. Единственно, надо понимать, что психологическую и физиологическую зависимость КФС убрать помогут, но без участия родных, друзей, соседей или просто психотерапевта вернуть человека к нормальной жизни сложно. Надо, чтобы он сам захотел избавиться от своей пагубной привычки, и при этом его не провоцировали, не подносили «ради праздника» и т.д. Заметим, что при активизации алкоголя на КФС №5, у употребившего его на утро обязательно наступает тяжелое похмелье, даже от алкоголя отличного качества (в отличие от активизации на КФС №1-4).

Бронхо-легочные проблемы решаются наиболее эффективно с КФС №5, тут прописан весь комплекс тем для борьбы с туберкулезом. Максимально много программ для восстановления всего желудочно-кишечного тракта (лечение дисбактериозов, восстановление микрофлоры кишечника, язва желудка, цирроз и др.). Дисбактериоз вообще самый подходящий фон для развития многих хронических заболеваний и частого рецидива уже имеющихся.

На КФС №5 есть очень мощные темы, которые стимулируют восстановление ферментной базы поджелудочной железы (сахарный диабет, панкреатит).

-гепатиты, циррозы, гепатозы, инфекционные поражения печени – на зону солнечного сплетения – вся физиология встает в норму

-нормализация микрофлоры кишечника, дисбактериоз, (запоры, поносы, вздутие, метеоризм, тошнота, изменение аппетита, дискомфорт и т.д.)

-психо-неврологические заболевания, в т.ч. и клептомания

-очистка почек (различные нефропатии)

-специфические и неспецифические заболевания легких (пневмония, туберкулез)

-программы снятие психологических зависимостей: алкогольной, наркотической, игромания и др.

-восстановление работы поджелудочной железы, селезенки (выработка ферментов)
-мощное очищение крови и лимфы

Применение косметологических приборов КФС полностью способно заменить огромное количество дорогостоящих косметологических и косметических процедур.

Специфика косметологических пластин (КФС №6, 7, 8) в том, что они изначально были призваны активизировать различные средства косметики (не порошки!). Но практика показала, что они настолько мощные по своему информационному содержанию, что способны намного больше, чем просто поддерживать красоту и молодость кожи. Тем более что без здоровья невозможно выглядеть свежо и привлекательно. Косметические пластины №6-8 можно использовать так же, как и КФС №1-5 – пить воду, проводить водные процедуры, носить на проблемных местах, применять вместе с физиотерапевтическими приборами и т.д.

КФС №6 - глубокое очищение кожи, отбеливание, активное питание и увлажнение

На КФС №6 прописаны программы очищения и отбеливания кожи, ее активное питание и насыщение влагой. Прописав тему гиалуроновой кислоты, разработчик С.В. Кольцов дал толчок к использованию КФС №6 при суставных, сердечно-сосудистых заболеваниях, при заболеваниях соединительной ткани, при повышении внутрглазного давления и т.д., поскольку гиалуроновая кислота широко представлена в тканях человека и является важнейшим компонентом основного вещества соединительной ткани, синовиальной жидкости (жидкости внутри суставов), стекловидного тела глаза. Ее много в коже, костях, клапанах сердца и в яйцеклетках. И пластина себя полностью оправдала при этих нозологиях.

К системным воздействиям КФС №6 можно также отнести

способность к восстановлению микроциркуляции (капиллярной системы), кислотно-щелочного равновесия, т.е. гомеостаза (все ферментные реакции normally проходят в узком диапазоне pH~7,4), КФС стимулирует работу надпочечников. Хорошо зарекомендовала себя при нарушениях в сосудистой системе (атеросклероз, варикозное расширение вен), при необходимости регуляции углеводного обмена, гормональной, нервной регуляции (реакция на стресс), при нарушенном водно-солевом равновесии.

-удерживает влагу в межклеточном пространстве: результаты по заболеваниям, связанным с обезвоживанием
-болезни суставов (различные артриты, артрозы, растяжения)

-восстановление функций щитовидной железы
-сосудистые и сердечные проблемы (атеросклероз, варикоз, тромбофлебит, острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт, инсульт)

-имеет антиоксидантное, регенерирующее воздействие
-при площадных поражениях кожи рекомендуется заряжать однократно кремы и гели для смазывания мест поражения, оказывает противовоспалительное и заживляющее действие, успокаивает раздражение эпидермиса

-отбеливает кожу, со временем убирает легкую пигментацию, предупреждает старение кожи, препятствует возникновению морщин.

Все косметические средства, **применяемые для очистки кожи лица, шеи и области декольте** (очищающие лосьоны, пенки, косметическое очищающее молочко, в том числе и средства для снятия макияжа, пилинги и др., соответствующие Вашему типу кожи и возрастной группе) обработать на КФС №6 в течение 4-10 минут, однократно, предварительно сняв крышки.

КФС №7 — питание, лифтинг (подтяжка), ускоренная регенерация (восстановление) кожи.

На КФС №7 помимо косметологических задач (разноплановое питание, насыщение всеми необходимыми веществами, активная подтяжка кожи, ускоренная регенерация)

прописаны важные системные программы оздоровления:

- поддержка сосудистой системы, усиление сосудистого тонуса. Увеличивается резистентность сосудистой стенки к перепадам сосудистого давления. Происходит восстановление стенок сосудов от капилляров до аорты, эластиновые волокна восстанавливаются во всех стенках сосудов
- стимуляция выработки гормонов щитовидной железы (йодсодержащих гормонов тироксина и трийодтиронина), регуляция обмена веществ
- снижение проявлений климактерического синдрома на уровне стероидной регуляции
- противоопухолевые программы
- мощные антиоксидантные и иммуномодулирующие темы
- улучшение показателей крови (нормализует гемоглобин)
- суставные заболевания (прописаны естественные растительные формы, которые помогают при болезнях суставов)
- программа регенерации клеток и тканей, хорошо зарекомендовала себя при хирургических вмешательствах, переломах
- разглаживает морщины и снимает отеки, постепенно укрепляет тургор кожи, ускоряет обновление клеток, укрепляет сосуды, активизирует естественную выработку коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты
- восстанавливает линии лица, подтягивая обвисшую кожу.
- улучшаются не только мимические, но и скелетные мышцы, при ослаблении которых появляются остеохондрозы и радикулиты
- помогает задержать появление видимых признаков старения
- стимулирует заживление ран, борется с акне (угри различной этиологии), обновляет клетки эпидермиса

Все косметические средства для лица, шеи и области декольте, **относящихся к ряду питающих**: кремы, гели, крем-гели, маски, обработать на КФС №7 в течение 4-10 минут, предварительно сняв крышки. Можно орошать кожные покровы активированной водой или наносить тонким слоем на очищенную кожу активированный детский крем.

КФС №8 — ночная формула красоты, молодости, здоровья.

КФС №8 относится к приборам с косметической программой, но среди всех пластин она занимает особое место. Во время ночного сна, когда весь организм отдыхает, КФС работает, восстанавливая естественным путем окислительно-восстановительный и кислотно-щелочной балансы, нарушенные в течение активного дня. Устраняет неполадки во всех системах нашего организма, способствуя синтезу многочисленных гормонов, в т.ч. мелатонина (гормона сна), продуцирующегося в эпифизе (шишковидная железа); тироксина (гормона щитовидной железы), гормона роста и гормона пробуждения, продуцируемых гипофизом в фазе ночного сна.

Если организм разбалансирован, то ночного отдыха ему перестанет хватать, наблюдается разбитость, тревожность, ослабление памяти, раздражительность. Систематическое же недосыпание может привести к печальным последствиям. Появляются резкие изменения метаболизма и эндокринной функции, аналогичные эффекту старения, ослабляется иммунная система, нарушается синтез гормонов, отвечающих за нашу жизнедеятельность.

Так, шишковидная железа (эпифиз) головного мозга вырабатывает гормон мелатонин. Мелатонин диктует организму, когда день, а когда ночь. Он является маятником для внутренних часов. Дневной свет блокирует выработку мелатонина, а ночью в темноте выработка идет полным ходом. Мелатонин защищает нас от стрессов и преждевременного старения, от простудных и онкологических заболеваний. Мы засыпаем, а мелатонин начинает работать – восстанавливает, укрепляет, ремонтирует. Ведь он один из самых сильных природных иммуномодуляторов и антиоксидантов, наиболее мощный поглотитель свободных радикалов – нестабильных молекул, которые, разрушая клетки и ткани, способствуют развитию рака и сердечных заболеваний. Оказалось также, что при сахарном диабете, при бронхиальной астме, глаукоме, катарахте и депрессиях снижен синтез мелатонина.

Во время спокойного, глубокого ночного сна в организме нормализуется работа всех внутренних органов, расслабляются мышцы, отдыхает нервная система, мозг успевает обработать накопленную за день информацию. Деятельность организма в это время направлена на оздоровление, задействованы процессы восстановления и омоложения. Таким образом, мелатонин, вырабатываемый с помощью КФС №8 во время ночного отдыха, оказывает омолаживающее действие на весь организм в целом.

- восстановление центральной эндокринной регуляции (эпифиз, гипоталамус, гипофиз), восстановление работы эпифиза и регуляция выработки мелатонина (на уровне эпифиза) - гормона, который регулирует процессы старения организма (как только уровень его начинает уменьшаться – мы стареем)

- проявляется некоторый седативный (успокаивающий) эффект, при нарушении сна использовать вечером для активизации еды и питья, принимать ванну или теплый душ и класть рядом с собой на ночь (подержать между ладонями), восстанавливается быстрая фаза засыпания, КФС успокаивающее воздействует на организм во время беспокойного сна

- восстанавливаются клетки роста (стволовые клетки)
- восстановление биологических ритмов (путешественникам, работающим вочные смены, отправляющимся в командировки и т.д.)

- восстанавливается соединительная ткань

- регулируется сосудистый тонус

- применять людям с хроническими заболеваниями, а для профилактики старения организма - всем после 35 лет

- быстро возвращает кожу к жизни, обладает стимулирующим, защитным действием и дарит коже здоровье, молодость и красоту.

Применять для активизации воды, напитков и продуктов питания, предназначенных для ужина, и перед сном. На ночь положить КФС №8 под подушку. Активировать **ночную косметику** или детский крем, водные растворы, гели, мази в течение 4-10 минут однократно перед применением.

Как подобрать КФС по своим заболеваниям?

Однозначных рекомендаций тут быть не должно, поскольку мы все разные, заболевания у нас разные и протекают по-разному. Поэтому можно только посоветовать, как поступить наиболее эффективно и разумно.

Некоторые врачи рекомендуют прежде, чем начать пользоваться корректорами, пройти полную диагностику организма. Затем повторить ту же диагностику через некоторое время (лучше не раньше, чем через месяц). Тогда вы будете видеть динамику процессов, происходящих в вашем организме, и сможете корректировать использование КФС. Но здравый смысл диктует поступать более просто.

При небольших проблемах со здоровьем достаточно использовать КФС №1, 2, 3(4).

При более серьезных и хронических заболеваниях или, если вы недавно перенесли какое-то тяжелое длительное заболевание, то к КФС №1, 2, 3(4) стоит подключить КФС №5.

Если вы молоды и абсолютно здоровы, то косметологические КФС №6, 7, 8 станут вашим подспорьем в борьбе со временем.

Таким образом, не этиология заболевания, а то, насколько процесс болезни запущен (или только развивается), является решающим фактором при выборе пластин. Напоминаем, что базовыми являются КФС №1 и №2. При проблемах половой сферы и эндокринного характера добавляем №3 (4). При хронических заболеваниях, при которых на вероятно произошли изменения в сфере желудочно-кишечного тракта и печени (длительный прием лекарств), нужно добавить КФС №5. При сосудистой патологии и при болезнях суставов можно прибавить КФС №6, 7. Ну, и при тяжелых хронических заболеваниях КФС №8 будет незаменим для полноценного ночного восстановления.

Желаем вам удачи в оздоровлении!

Примеры использования КФС при различных заболеваниях

Сахарный диабет или выраженные проблемы поджелудочной железы - №1, 2, 3 (4), 5
Простатит, аденома - №1, 2, 4
Бронхиальная астма - №1, 2, 3 (сильное паразитарное загрязнение)
Онкология - №1, 2, 3, (4), 5
Тромбофлебит, варикозное расширение вен - №1, 2, 3, 4 (разжижающий фактор) + №6, 7
Мочеполовые болезни - №1, 2, 3 (4), 5
Острые инфекции – пить с №1 и №2 каждые 1/2 часа (чредовать) + народные средства (малина, мед, облепиха, смородина, лимон и др.)
Атеросклероз - №1, 2, 3 (4), 5. № 1, 3 держать на сгибе локтя 20 мин, №6, 7
Половая система - №1, 2, 3 (4), + №6, 7, 8 для омоложения
Любые хронические заболевания - №1, 2, 3 (4), 5+ №8
Щитовидная железа - №1, 2, 3 (4), 5+ №6, 8
Гипертония - №1, 2, 3 (4) + прокачки обязательно!
Проблемы ЖКТ (дисбактериоз, запор, язва, гастрит) - №1, 2, 3 (4), 5
Перелом, хирургическое вмешательство, когда надо восстановить целостность тканей - №1, 2 + №7
Алкоголики - №1, 2, 5
Спортсменам - №1, 2, 3 (4) + №7
Болевой синдром индивидуально подбирать, но если воспаление, отек, то скорее №2, чредовать с №1
Суставы, даже грыжи позвоночника - №1, 2 + №6, 7
Сосудистая система - №1, 2, 3 (4) + №6, 7
Псориаз - №1, 2, 3 (4), 5 + №6, 7, 8
Проблемы кожи (дерматиты, экземы) - №1, 2, 5
Ушиб, свежий ожог – сразу на место, ни синяка, ни пузыря не будет - №1, 2
Глазные инфекции - №1, 2, 5. глаза промывать водой, закапывать + печень захламлена

Тонизирует душ утром, дает энергетическую подпитку + пить водичку - №1

Вечером снимают излишнее напряжение ножные ванны или душ - №2, 8

Трофические язвы - №1, 2, 3 (4), + 5

Сердце болит - №1, 2, 3 (4), 5 + ежедневно делать прокачку руки-ноги, смазывать активированным детским кремом руки по локоть и ноги по колено

Аллергия - №1, 2 + 5

Эндокринная система - №1, 2, 3 (4), + 5

Нервная система - №1, 2, 3 (4)

Бронхо-легочная система - №1, 2, 5

Камни в почках - №1, 2, 3 (4), 5

Используемые материалы:

1. Катасонов В.Н. Корректоры функционального состояния организма (КФС) С.В.Кольцова. г. Санкт-Петербург
2. Терентьев Д.Г., к.м.н., зав. отд. онкологии ООО НКЦ «О и Н Биотерапия», г. Новосибирск, и Вергунов Е.Г., аспирант РГПУ им. Герцена, кафедра детской психологии и психофизиологии, г. Санкт-Петербург. Доклад на II Научно-медицинской конференции «Опыт использования КФС». Компания Центр-Регион. Москва, 2010 год.
3. Выступления врачей на II Научно-медицинской конференции. Компания Центр-Регион. Москва, 2010 год.
4. Мазуркова Л.Б. КФС – медицина будущего. Издательские материалы компании Центр-Регион.
5. Боргачева Ж.Г. Корректор функционального состояния. Результаты применения. Издательские материалы компании Центр-Регион.
6. Аудиоматериалы и видеоматериалы компании Центр-Регион за 2009-2010 год.
7. Марасанова И.В. Доклад на II научно-медицинской конференции «КФС и водолечение по методу Севастьяна Кнейппа». Компания Центр-Регион. Москва, 2010 год.